

Höchste Messgenauigkeit und

Sicherheit in der Lungenfunktion



## custo spiro mobile

### Präzise Messungen in der Lungenfunktion

Mit dem Lungenfunktions-Messgerät custo spiro mobile können alle spirometrischen Standard-Untersuchungen schnell und genau durchgeführt werden. Die Untersuchung kann unter drei verschiedenen Aspekten betrachtet werden (klinisch, arbeitsmedizinisch, COPD-GOLD).



#### Unsere Vorteile:

- Besonders haltbarer Messkopf, innen aus hochfester Keramik
- Wechselbarer Adapter
- Messsensorik mit Drucksensor für präzisere Messungen
- Einfache und sichere Bedienung
- Elektronische Kalibrationsanpassung
- Integrierter Neigungssensor zur Kontrolle der Körperhaltung während der Messung
- Mobiler Einsatz an allen PCs durch USB-Anschluss

## custo spiro protect

### Sicherheit in der Lungenfunktion

custo spiro protect ist ein hocheffizienter Filter gegen Viren und Bakterien. Er bietet bei hervorragenden Messergebnissen einen hohen Infektionsschutz für Ihre Patienten.




#### Unsere Vorteile:

- Hohe bakterielle und virale Filtrationseffizienz (mindestens 99,999 %\*)
- Laserversiegeltes Gehäuse für maximale Dichtigkeit
- Geschützte Filteroberfläche gegen Verunreinigung und Inspiration von Filterfasern
- Patientenfreundliches Mundstück
- Gehäuse aus weißem Polypropylen
- Elektrostatischer Filterkern
- ISO 10993-1


\* Labortest gemäß ASTM F2101-07

# Lungenfunktions-Highlights in der custo diagnostic-Software


- **Sofortiger Blick auf alle wichtigen Parameter** der Spirometrie (FEV1, FVC, FEV1/FVC (Tiffeneau-Index), etc.)
- **Leitlinienkonforme Bewertung** der Ergebnisse anhand von nationalen und internationalen Sollwertautoren, z. B. GLI-Referenzwerte
- **360°-Blick auf die Ergebnisse** der Untersuchung (klinisch, arbeitsmedizinisch, COPD-GOLD)
- **Automatischer Befund mit Befunderläuterung**
- Z-Score-Trend: **Vergleich über mehrere Messungen** (Tage/Wochen/Monate) bei einem Patienten möglich
- Testmethoden **Spasmolyse und Provokation**
- Übersichtliche Therapiekontrolle durch automatischen **Langzeit-Trend**
- **Kinderanimation** „Schnaufi der Drache“

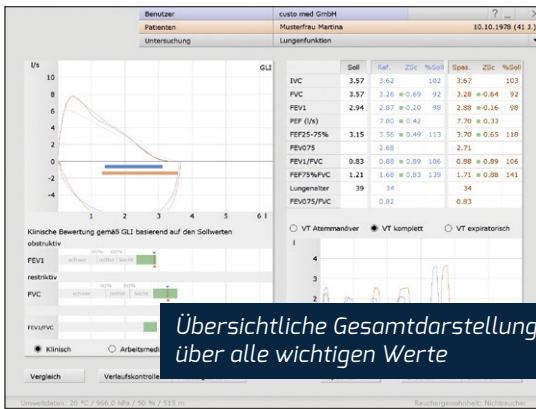

Übersichtliche Gesamtdarstellung über alle wichtigen Werte

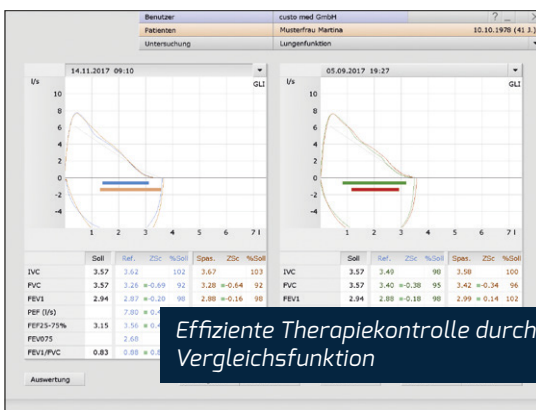


Effiziente Therapiekontrolle durch Vergleichsfunktion

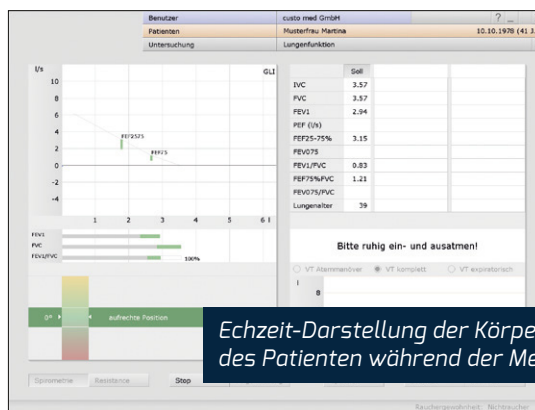

Echzeit-Darstellung der Körperhaltung des Patienten während der Messung



Kinderanimation „Schnaufi der Drache“

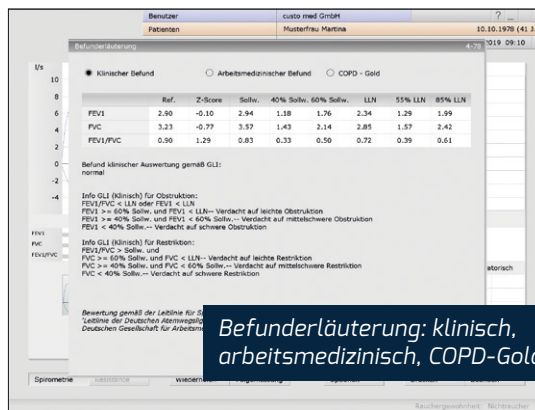

Befunderläuterung: klinisch, arbeitsmedizinisch, COPD-Gold

## Innovative Systemlösungen für Ihre Diagnostik


Unsere Marke steht seit 1982 für innovative Systemlösungen in der kardiopulmonalen Diagnostik. In Kooperation mit kompetenten Vertriebs- und Servicepartnern bieten wir professionelle Lösungen an und berücksichtigen dabei Ihre individuellen Gegebenheiten und IT-Strukturen. Ob stationär oder mobil, Einzelplatz oder standortübergreifende Netzwerklösung, Praxis oder Klinik – Ihr modulares custo med-System ist eine lohnende Investition in die Zukunft.

Unsere modulare Plattform custo diagnostic ist die intelligente Verbindung zwischen Medizintechnik und Verwaltungssoftware.



Besuchen Sie uns auf YouTube!

[www.customed.de](http://www.customed.de)

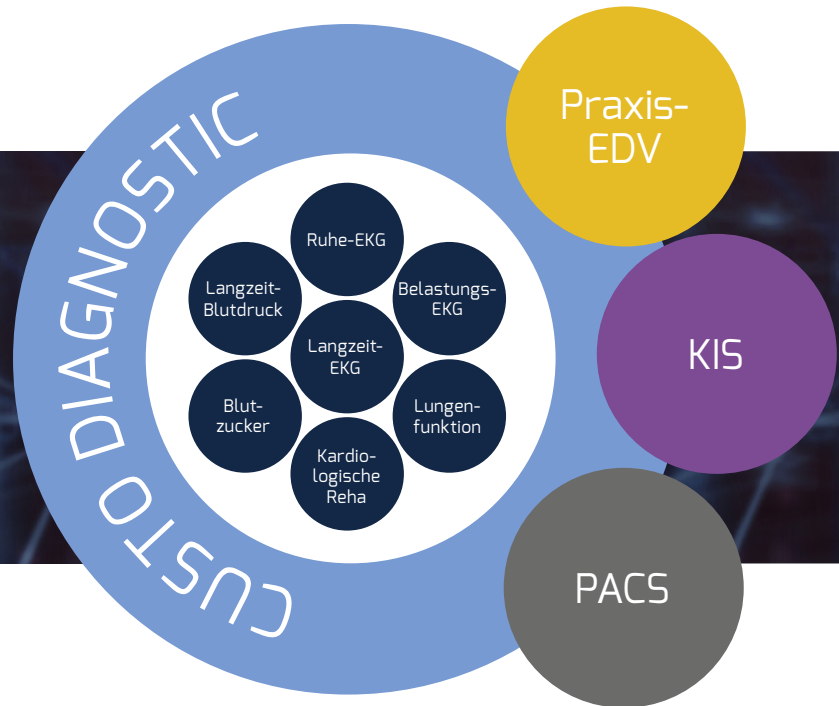

# MEHR INFORMATIONEN

custo med GmbH • Maria-Merian-Straße 6 • 85521 Ottobrunn • Tel.: +49 (0) 89 710 98-00 • Fax: +49 (0) 89 710 98-10  
E-Mail: [info@customed.de](mailto:info@customed.de) • Bitte ausfüllen und an custo med faxen, schicken oder eingescannt per E-Mail senden.  
Gerne können Sie auch unser Kontaktformular unter [www.customed.de/kontakt](http://www.customed.de/kontakt) nutzen.

Bitte senden Sie mir Ihren aktuellen Hauptkatalog zu.



Bitte senden Sie mir Informationsmaterial per Post  / per PDF :

### Praxis-/Klinik-Anschrift:

Name \_\_\_\_\_

Ansprechpartner \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_

PLZ/Ort \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

Fax \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

Ruhe-/Belastungs-EKG

Langzeit-EKG

Langzeit-Blutdruck

Lungenfunktion

Blutzucker

Klinik-IT

Kardiologische Reha

Hygienetaschen „custo clean“