

Elektroden-Innovationen –  
entwickelt vom führenden EKG-Hersteller

**Entdecken Sie das  
Geheimnis für das  
perfekte EKG!**






## NEU: custo wing – die neue Patch-Elektrode für das perfekte EKG!

Egal, ob Langzeit-, Ruhe- oder Belastungs-EKG, mit der neuartigen Patch-Elektrode custo wing ist das perfekte EKG garantiert. Dank eines Hybrid-Gels eignet sie sich hervorragend für alle Anwendungsgebiete. Der dezentrale Druckknopfanschluss ist durch eine zusätzliche Klebezone fixiert, wodurch Artefakte durch Bewegung des Kabels ausgeschlossen werden können.

### Unsere Vorteile:

- Hybrid-Gel für Langzeit-, Ruhe- oder Belastungs-EKG
- \* Hervorragende Signalqualität durch vollflächige Klebefläche und dezentralen Anschluss
- \* Artefaktreduzierung durch klebenden, dezentralen Elektrodenanschluss als Zugentlastung
- Große Gelfläche zur Reduktion des Übergangswiderstands
- Offenporiges, atmungsaktives Trägermaterial
- Sehr gute Anfangs- und Langzeithaftung (auch bei Schweiß)
- Biokompatibilität
- \* Optimale Aufbewahrung durch wiederverschließbare Verpackung
- \* Schnelle und ordentliche Entnahme durch vorgestanztes Trägermaterial

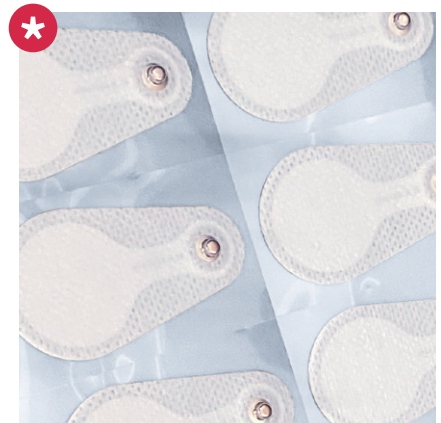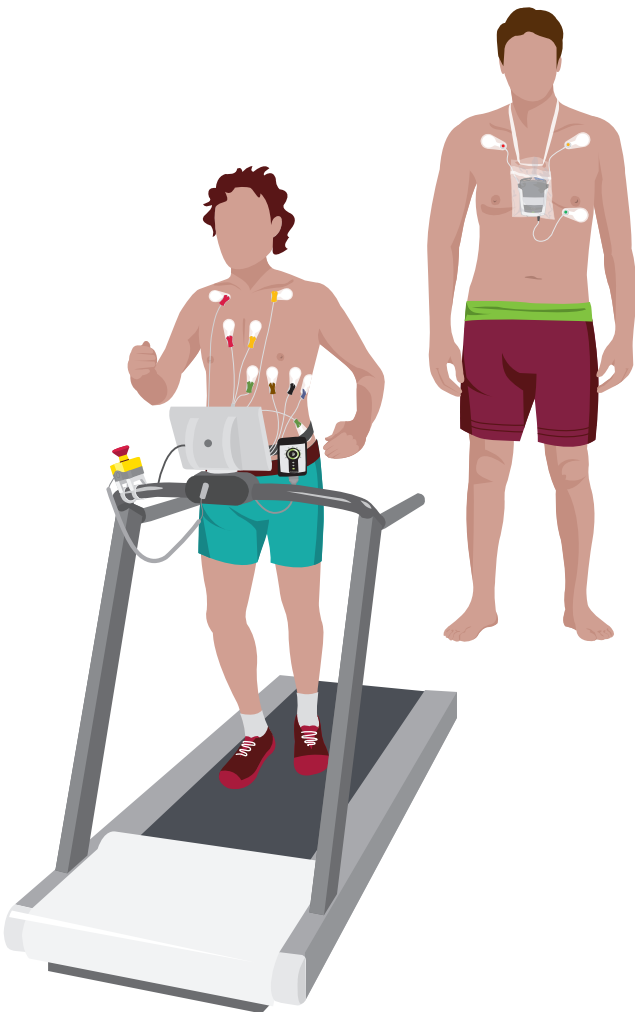

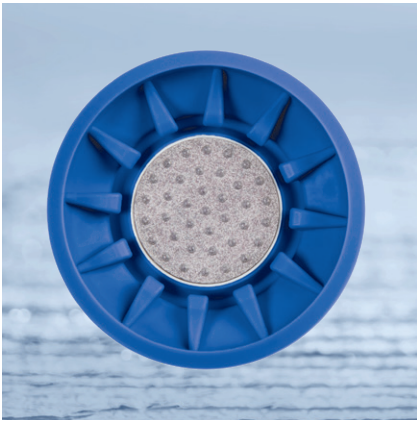

## Saugelektrode – EKG-Gürtel – Patch-Elektrode Elektroden-Innovationen vom EKG-Spezialisten!

### 2009: Saugelektrode



*custo med bringt mit den wechselbaren und wiederverwendbaren Saugelektroden für die custo cardio 200/400 eine völlig neue Art Elektrode auf den Markt, die ein klinisches Hygienezertifikat bekommt.*

### 2014: custo belt

*Mit dem ersten medizinischen EKG-Gürtel ist ein perfektes 3-Kanal-EKG ohne störende Kabel möglich. Er ist waschbar, wiederverwendbar und hat einen hohen Patientenkomfort.*

### NEU: custo wing

*Die custo wing-Elektrode vereint nun die Vorteile der Saugelektrode und des custo belt. In Kombination mit dem neuen Langzeit-EKG-Rekorder custo guard holter liefert sie ein optimales, unabhängiges 3-Kanal-Langzeit-EKG. Dank ihres Hybrid-Gels ist sie aber auch hervorragend für das Belastungs-EKG geeignet.*

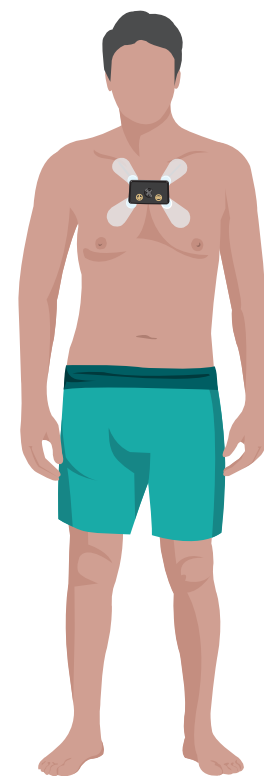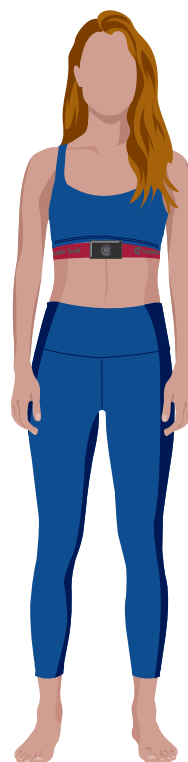

## Innovative Systemlösungen für Ihre Diagnostik


Unsere Marke steht seit 1982 für innovative Systemlösungen in der kardiopulmonalen Diagnostik. In Kooperation mit kompetenten Vertriebs- und Servicepartnern bieten wir professionelle Lösungen an und berücksichtigen dabei Ihre individuellen Gegebenheiten und IT-Strukturen. Ob stationär oder mobil, Einzelplatz oder standortübergreifende Netzwerklösung, Praxis oder Klinik – Ihr modulares custo med-System ist eine lohnende Investition in die Zukunft.

Unsere modulare Plattform custo diagnostic ist die intelligente Verbindung zwischen Medizintechnik und Verwaltungssoftware.



Besuchen Sie uns auf YouTube!

[www.customed.de](http://www.customed.de)

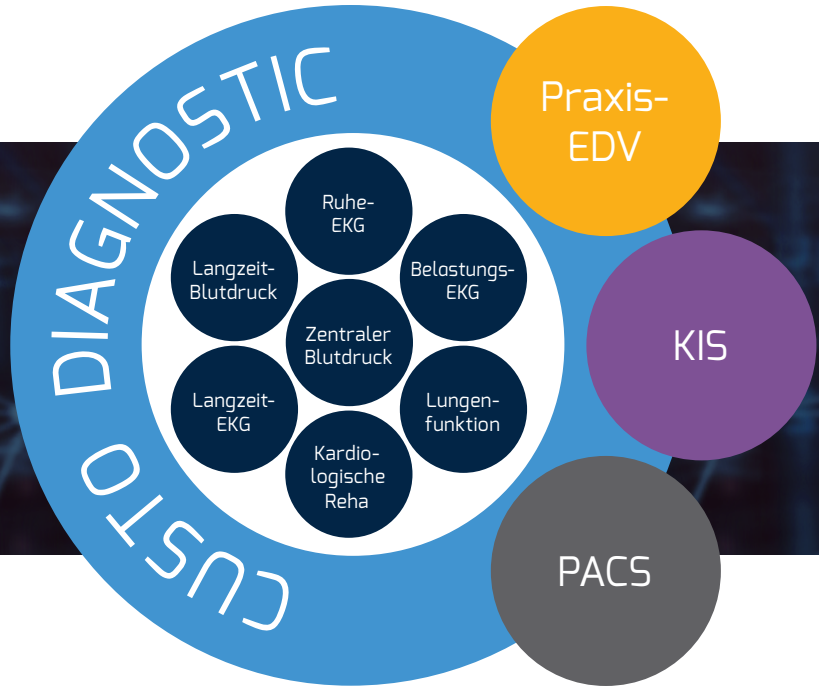

# MEHR INFORMATIONEN

custo med GmbH • Maria-Merian-Straße 6 • 85521 Ottobrunn • Tel.: +49 (0) 89 710 98-00 • Fax: +49 (0) 89 710 98-10  
E-Mail: [info@customed.de](mailto:info@customed.de) • Bitte ausfüllen und an custo med faxen, schicken oder eingescannt per E-Mail senden.  
Gerne können Sie auch unser Kontaktformular unter [www.customed.de/kontakt](http://www.customed.de/kontakt) nutzen.

Bitte senden Sie mir Ihren aktuellen Hauptkatalog zu.



MT-12.22

Bitte senden Sie mir Informationsmaterial per Post  / per PDF  :

### Praxis-/Klinik-Anschrift:

Name \_\_\_\_\_

Ansprechpartner \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_

PLZ/Ort \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

Fax \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

- Ruhe-/Belastungs-EKG
- Langzeit-EKG
- Langzeit-Blutdruck
- Lungenfunktion
- Klinik-IT
- Kardiologische Reha
- Hygienetaschen „custo clean“